



panthera[®]
PRODUKTKATALOG



Hej!

För 36 år sedan skadade jag mig i en racingolycka. Ganska snart kom jag fram till att om jag ville ha en bra rullstol så fick jag bygga den själv.

Vad var det då jag ville ha? Jag ville ha en stol som redan från början var byggd med tanke på att man skall köra den själv. Lätt, sittriktig och härlig att köra. Från racingen hade jag lärt mig självklarheter som betydelsen av låg vikt, styvt chassi, rätt balansering och rätt hjulvinklar. Min målsättning blev att bygga den lättaste stolen på marknaden. Sedan dess har det blivit många rullstolsmodeller – och användare av dem.

Stor glädje har det också varit att bygga barnstolar som är mer lättkördade än de som har erbjudits på marknaden. Det behövs inga marknadsundersökningar. Det syns i ett barns ansikte om en stol är bra eller inte.

För något år sedan kunde vi också presentera vår ultralätta Panthera X. Byggd i det alldeles för dyra, men fantastiska, material som kolfiber utgör har den fått egenskaper som ingen trodde var möjliga.

Min dröm om den ultimata stolen var nästan uppfylld. Men som konstruktör, och racerförare också för den delen, vet man att utvecklingen aldrig stannar. Det går alltid att köra lite fortare eller att göra det lite bättre. Så jag jobbar oförtrutet vidare.

Jalle Jungnell
Grundare/ägare/konstruktör, Panthera

panthera®

En Panthera gör det mesta i ditt vardagsliv lättare. Den har utmärkta köregenskaper, är lätt att lyfta och har en bra sittkomfort.

Att den underlättar vardagslivet beror på att vi fokuserat på en rullstols tre absolut viktigaste egenskaper. Köra, sitta och lyfta. Dessa tre saker görs dagligen, året runt och måste därför fungera optimalt.

KÖRA

Med ett chassi av krommolybden eller kolfiber och fotbåge samt drivringar av titan blir rullstolen naturligtvis fjäderlätt och otroligt lättmanövrerad. Med en precis avvägd cambervinkel på 2,2 grader får du härliga köregenskaper, samtidigt som stolen förblir smal.

SITTA

Steglöst inställbar ryggvinkel, härligt mjuk ryggklädsel med polstrad, justerbar överkant och spännband hela vägen gör att du kan forma ryggklädseln för exakt stöd. Rullstolarna har 7 eller 4 graders sittvinkel, reglerbara spännband i sitsen och en rejält tilltagen reglerbar sittpåse. Denna kombination ger dig en förnämlig möjlighet att hitta en både bekväm och funktionell sittställning.

LYFTA

Låg vikt, lågt chassi samt ett naturligt och välbalanserat grepp gör det lekande lätt att lyfta stolen i och ur bilen.





Panthera X är världens lättaste rullstol, med både chassi och rygg tillverkad i kolfiber. Panthera X är en rullstol avsedd för den erfarna och aktiva brukaren som klarar att hantera en lättbalanserad rullstol utan tippskydd då detta ej är ett tillval. Tack vare banbrytande teknik kan fibrerna i kolfibern arrangeras så att konstruktionen blir både otroligt stark och fantastiskt lätt.

Panthera X är därför både rolig att köra och enkel att hantera – de flesta kan lyfta in den i en bil med en hand. Panthera X har en fast bakaxel. Stolen balanseras med hjälp av fyra positionslägen för infästningen av ryggstativet. Vinkeln på ryggstödet är justerbart. Rygghöjden kan justeras mellan 22 och 35 cm i 1-centimeterssteg.



Mått Panthera X

Sittbredd:	33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:	22–35 cm
Sitthöjd bak:	43 cm
Sitthöjd fram:	47 cm
Sittdjup:	35–46 cm (justerbar)
Sittvinkel:	7 grader
Totallängd:	82,5 cm
Totalhöjd:	69 cm
Totalbredd:	sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:	100 kg

Vikter Panthera X

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
33 cm	4 400 g	2 100 g
36 cm	4 450 g	2 150 g
39 cm	4 500 g	2 200 g
42 cm	4 550 g	2 250 g
45 cm	4 600 g	2 300 g

Standardutförande

- Chassi av kolfiber
- Fotbåge av aluminium 7075
- Drivhjul 24" Spinergy X
- Drivringar av aluminium 7075
- Balansering med 4 positionslägen
- Bakaxel av kolfiber
- Länkhjul 3"
- Ryggstöd av kolfiber, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Enhandsbroms X
- Vadband
- Verktygssats
- Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande utan broms.



Tack Upplands Motor för lån av bil.

panthera®

U2 LIGHT

Panthera U2 light är en rullstol avsedd för den erfarna och aktiva brukaren som klarar att hantera en lättbalanserad rullstol utan tippskydd då detta ej är ett tillval. Panthera U2 light har samma sittvinklar och mått som Panthera U2 och chassit har små ytterdimensioner vilket gör rullstolen liten, lätt och kompakt.

Tack vare konstruktionen och den lätta vikten är U2 light ett utmärkt val för dig som ställer höga krav på sitt- och köregenskaper och dessutom behöver avlasta kroppen från upprepade tunga lyft som t.ex. lyft av rullstolen i och ur bilen.

I standardutförande ingår extra lätta Spinergy Spox light hjul. Rullstolen har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För rätt balansering finns två utföranden av chassit: U2 light och U2 light L. En justerbar rygginfästning med fixering i 3 positioner på sitsröret möjliggör finjustering av balanseringen.



Vikter U2 light

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
33 cm	6 844 g	3 856 g
36 cm	6 924 g	3 936 g
39 cm	7 004 g	4 016 g
42 cm	7 084 g	4 096 g
45 cm	7 164 g	4 176 g

Vikter U2 light L

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
33 cm	6 906 g	3 918 g
36 cm	6 986 g	3 998 g
39 cm	7 066 g	4 078 g
42 cm	7 146 g	4 158 g
45 cm	7 226 g	4 238 g

Mått U2 light

Sittbredd:	33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:	25, 30 och 35 cm
Sitthöjd bak:	43 cm
Sitthöjd fram:	47 cm
Sittvinkel:	7 grader
Sittdjup:	36–45 cm (justerbar)
Totallängd:	82 cm (U2 light L chassi)
Totalhöjd:	69–79 cm
Totalbredd:	sittbredd +20 cm
Max. brukarvikt:	33–45 cm, 100 kg

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Fotbåge av titan
- Drivhjul 24" Spinergy Spox light
- Drivring av titan
- Balansering med 3 positionslägen
- Bakaxel av kolfiber
- Länkhjul 3"
- Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Enhandsbroms
- Vadband
- Sitsväska med magnetinfästning
- Verktygsats
- Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande med 30 cm rygg, fotbåge, enhandsbroms och 24" Spinergy Spox light hjul.



panthera[®]

U2

Panthera U2 är en modern aktivstol. Med sin slimmade front och ergonomiska utformning blir den underbart smidig att ta sig fram i.

Den smala och insvängda fronten hjälper till att hålla ben och fötter på plats. Att fronten är insvängd innebär också att du kommer närmare vid förflyttningar så att även det underlättas.

U2 kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.



Mått U2

Sittbredd:	33, 36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:	20, 25, 30, 35, 40 och 45 cm
Sitshöjd bak:	43 cm
Sitshöjd fram:	47 cm
Sittvinkel:	7 grader
Sitsdjup:	35–46 cm (justerbar)
Totallängd:	75–87 cm
Totalhöjd:	64–84 cm
Totalbredd:	sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:	33–42 cm, 100 kg. 45 cm, 150 kg

Vikter U2

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
33 cm	8 270 g	4 714 g
36 cm	8 330 g	4 774 g
39 cm	8 390 g	4 834 g
42 cm	8 450 g	4 894 g
45 cm	8 686 g	5 130 g

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Fotbåge av titan
- Drivhjul 24"
- Drivringar av titan
- Balansering, steglös
- Bakaxel av kolfiber
- Länkhjul 3"
- Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Vadband
- Broms
- Verktygssats
- Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med 30 cm rygg, hög broms och 24" standard drivhjul. U2 finns tillgänglig från 7 300 g i alternativt utförande.



panthera®

S2 OCH S2 KORT*

Under de år som gått sedan den första Pantheran konstruerades har utvecklingen gällande sitt- och köregergonomi gjort stora framsteg. Vi tog fasta på denna kunskap och tillsammans med 30 års erfarenhet av att bygga superlätta rullstolar utvecklade vi en ny standardstol: Panthera S2.

Panthera S2 är en stor framgång. Med en rät knäledsvinkel, fotbågen placerad längre bak och en steglöst reglerbar rygg får de flesta en upprätt och ergonomisk sittställning. S2 har full rambredd i fronten och framhjulen är placerade längre ut än på tidigare modeller. Detta gör att länkhjulen inte tar i hämlarna.

S2 kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.

Vikter S2

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
-	-	-
33 cm	8 300 g	4 744 g
36 cm	8 360 g	4 804 g
39 cm	8 420 g	4 864 g
42 cm	8 480 g	4 924 g
45 cm	8 716 g	5 160 g
50 cm	8 776 g	5 220 g

Vikter S2 kort

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
30 cm	8 160 g	4 604 g
33 cm	8 220 g	4 664 g
36 cm	8 280 g	4 608 g
39 cm	8 340 g	4 784 g
42 cm	8 400 g	4 844 g
45 cm	8 636 g	5 080 g



Mått S2 och S2 kort

Sittbredd (S2 kort):	30, 33, 36, 39, 42 och 45 cm
Sittbredd (S2):	33, 36, 39, 42, 45 och 50 cm
Ryggstödshöjd:	20, 25, 30, 35 och 40 cm
Sitthöjd bak:	43 cm
Sitthöjd fram:	47 cm
Sittvinkel:	7 grader
Sittdjup S2:	40 cm
Sittdjup S2 kort:	27–33 och 35 cm (justerbar)
Totallängd:	78–90 cm
Totalhöjd:	64–84 cm
Totalbredd:	sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:	30–42 cm, 100 kg. 45–50 cm, 150 kg.

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Fotbåge av titan
- Drivhjul 24" standard
- Drivring av titan
- Balansering, steglös
- Bakaxel av kolfiber
- Länkhjul 5"
- Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Broms
- Vadband
- Verktygssats
- Bruksanvisning

* S2 finns i ett antal olika utföranden som visas på www.panthera.se

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med 30 cm rygg, hög broms och 24" standard drivhjul. S2 finns tillgänglig från 7 300 g i alternativt utförande.



panthera®

S2 SWING

Panthera S2 Swing är avsedd för dig som behöver en lättmanövrerad rullstol med goda sitt-, kör- och lyftegenskaper och svängbara benstöd. Rullstolen har alla goda egenskaper för en aktivrullstol med stabil konstruktion i lättviktsklass kombinerat med en diskret och kompakt design av svängbara benstöd.

Rullstolen har en sittvinkel på 4 grader vilket gör det enklare att hitta en god sittställning för den som behöver sparka sig fram eller av andra skäl behöver sitta mer plant. Låsmekanismen till de svängbara benstöden är diskret och praktiskt integrerad med greppvänlig konstruktion i benstödet rör. Du kan med ett enkelt grepp svänga bort och ta av ena eller båda benstöden för att sparka dig fram och för att underlätta förflyttningar.

Bromsen är diskret placerad intill ramröret och är inte i vägen vid förflyttningar. Den kan dessutom finjusteras utan verktyg!

S2 Swing kan utrustas med alla de tillbehör som Panthera kan erbjuda.



Mått S2 Swing och S2 Swing kort

Sittbredd (Swing kort):	33, 36 och 39 cm
Sittbredd (Swing):	36, 39, 42 och 45 cm
Ryggstödshöjd:	20, 25, 30, 35, 40 och 45 cm
Sitthöjd bak:	43 cm
Sitthöjd fram:	45 cm
Sittvinkel:	4 grader
Sittdjup (Swing kort):	35 cm
Sittdjup (Swing):	40 cm
Total bredd:	sittbredd + 20 cm
Total längd (Swing kort):	85 cm
Total längd (Swing):	90 cm
Total höjd:	73 cm (30 cm rygg)
Max. brukarvikt:	33–42 cm, 100 kg. 45 cm, 150 kg

Vikter S2 Swing

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt exkl. benstöd
36 cm	9 660 g	6 104 g
39 cm	9 720 g	6 164 g
42 cm	9 780 g	6 224 g
45 cm	10 016 g	6 460 g

Vikter S2 Swing kort

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt exkl. benstöd
33 cm	9 460 g	5 904 g
36 cm	9 520 g	5 964 g
39 cm	9 580 g	6 024 g

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Undansvängbara fotplattor
- Drivhjul 24" standard
- Drivring av titan
- Balansering, steglös
- Bakaxel av kolfiber
- Länkhjul 5"
- Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Broms
- Vadband
- Verktygsatts
- Bruksanvisning

Totalvikterna baseras på stolens standardutförande med 30 cm rygg, fällbara fotplattor, broms och 24" standard drivhjul.



panthera[®]

BAMBINO

Vi på Panthera tillverkar aktivstolar som under alla år fått erkännandet att vara de absolut mest lättrullade och smidigaste stolarna på marknaden. Panthera Bambino är inget undantag. En lättrullad vardagsstol för barn med samma förnämliga egenskaper som sina större familjemedlemmar.

Med vårt breda tillbehörsprogram och de många inställningsmöjligheterna kan en väldigt stor grupp olika barn använda Bambino. Den är lätt att köra, den är lätt att anpassa och den är lätt att lyfta. Panthera Bambino är helt enkelt en riktig aktivstol för barn. Finns nu även med abduktionsfront, som ger 6 cm bredare utrymme vid knäna vid samma sittbredd. Se lilla bilden.



Mått Bambino

Sittbredd:	24, 27, 30 och 33 cm
Ryggstödshöjd:	17–25 cm 27–35 cm (alternativ)
Sitthöjd bak:	39 cm
Sitthöjd fram:	41 cm
Sittdjup:	25–32,5 cm (justerbar) 20–27,5 cm (sittbredd 24 cm, justerbar)
Sittvinkel:	4 grader
Totallängd:	66–71,5 cm
Totalhöjd:	57–65 cm
Totalbredd:	sittbredd + 20 cm
Max. brukarvikt:	50 kg

Vikter Bambino

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
24 cm	8 120 g	4 894 g
27 cm	8 348 g	5 140 g
30 cm	8 576 g	5 368 g
33 cm	8 804 g	5 596 g

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Hel fotplatta
- Drivhjul 20", 22" eller 24"
- Drivringar av titan
- Balansering, steglös
- Länkhjul 5"
- Ryggstöd, steglöst justerbar vinkel
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Tippskydd
- Broms
- Verkytsgsats
- Bruksanvisning

Vikterna baseras på stolens standardutförande, med fotplatta, framflyttad broms, tippskydd och 22" standard drivhjul.



panthera[®]

MICRO

Panthera Micro är stulen för de allra minsta barnen. Att kunna röra sig själv är som vi alla vet mycket viktigt, inte minst för ett barn. Därför är Panthera Micro extremt byggd för att vara så lättkörd som det bara är möjligt.

Krommolybden och titan bildar stommen, framhjul för marathonstolar blir drivhjul. Precis som på många tennisstolar får den bara ett framhjul för lättare rotation.

Panthera Micro är byggd för barn mellan ett och fem år (den yngsta användaren vi träffat var 8 månader) och är avsedd för inomhusbruk.



Vikter Micro

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
24 cm	3 518 g	2 342 g
27 cm	3 564 g	2 388 g

Vikter Micro lång

Sittbredd	Totalvikt	Transportvikt
24 cm	3 782 g	2 474 g
27 cm	3 828 g	2 520 g

Mått Micro

Sittbredd:	24 och 27 cm
Ryggstödshöjd:	20 cm
Sitthöjd Micro:*	30,5 cm
Sittdjup Micro:	15–20 cm
Sittvinkel:	0 grader
Totallängd:	62 cm
Totalhöjd Micro:	51,5 cm
Totalbredd:	sittbredd + 22 cm
Max. brukarvikt:	30 kg

Mått Micro lång

Sittbredd:	24 och 27 cm
Ryggstödshöjd:	20 cm
Sitthöjd Micro Lång:*	34 cm
Sittdjup Micro Lång:	20–25 cm
Sittvinkel:	0 grader
Totallängd:	72,5 cm
Totalhöjd Micro Lång:	54 cm
Totalbredd:	sittbredd + 22 cm
Max. brukarvikt:	30 kg

Standardutförande

- Chassi av krommolybden
- Fotplatta
- Drivhjul 18" eller 20"
- Ej drivring
- Balansering, steglös
- Bakaxel av aluminium
- Länkhjul 3" hård slitbana
- Ryggstöd, fast
- Ryggklädsel, justerbar
- Sitsklädsel, justerbar
- Tippskydd
- Verktygssats
- Bruksanvisning

* Vikterna och sitthöjderna baseras på stolens standardutförande, med 18" drivhjul för Micro och 20" drivhjul för Micro Lång.



panthera®

TILLBEHÖR

Det finns många alternativ och tillbehör till Panthera. Här visas endast ett litet urval, övriga tillbehör hittar du på: www.panthera.se.

Bromsar



Framflyttad broms



Enhandsbroms



Hjul

Standard 20" 22" 24"

Spider 24"

Spinergy Spox 24" 25" 26"

Spinergy Spox Sport 24" 26"

Spinergy Spox light 24"



Sidoskydd



Light

Plast



Med skärm



Armstöd



Fotstöd



Fotbåge U2/S2

Bambinofotplatta



Plastplatta



Fällbara



Tippskydd

Standard




Till Micro



Camberaxlar

2, 4, 8, 10, 12, 14 grader camber axlar

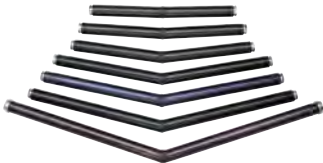

Länkhjul



Mountainbike 24"



Micro 18" 20"



Körhandtag

Hög och sänkbart
Fast
Vikbart



Armkrok



Körbåge
Nackdyna
Bambino



Sitsväska



Dynor

Dynor finns i
en stor mängd
bredder och
standard tjocklekar.




Verktygssats




Tetra Quick Release

Spox

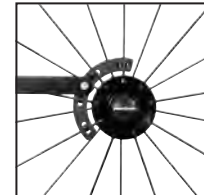

Standard

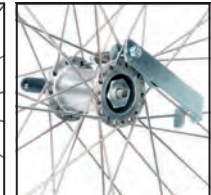

Ekerskydd



Drivringar

Titan/PRC/Polymer
kompakt/Geléplastad/
Maxgrepp tunn och
grov.



panthera[®]

Panthera AB
Gunnebogatan 26
163 53 Spånga Sweden

Tel: +46 (8) 761 50 40 Fax: +46 (8) 621 08 10 E-post: panthera@panthera.se Hemsida: www.panthera.se