


Översikt av nya drivhjul och drivringar



Nytt standarddrivhjul

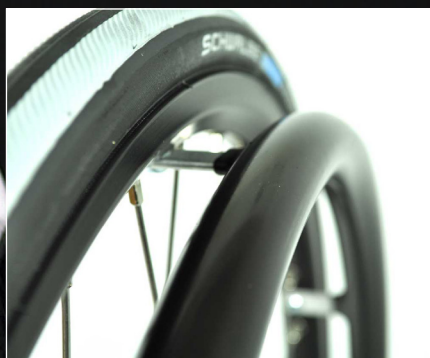

Para Grip drivring som ersätter PRC



Tetra Grip drivring som ersätter Geléplast

Nya standarddrivhjul

Som tidigare meddelats så ersätts våra tidigare standarddrivhjul med det nya förbättrade drivhjulet som har en starkare och styvare fälg samt en ny infästning av drivringen med 6 infästningspunkter som gör det möjligt att byta drivring utan att behöva demontera däck och slang, då skruvarna är åtkomliga från utsidan på fälgen. Införandet startade i Mars 2013.

Nya ersättningsdrivringar för PRC och geléplast

Tidigt på året 2013 fick vi också information om att vår amerikanska leverantör slutar, med omedelbar verkan, att tillverka och leverera drivringarna av modell PRC och Geléplast. Därför blev vi tvingade att tidigarelägga introduktionen av de nya drivringar som Panthera under hösten / vintern 2012 / 2013 utvärderat, med ett gott resultat. Det är Tetra Grip och Para Grip, från den mycket välrenommerade tyska tillverkaren, Tetra Equipment. Tetra Grip är något hårdare än den Geléplastade drivringen och har bättre friktion och längre livslängd. Para Grip är mycket lik PRC till funktion men har en svart färg.

Nedan och på nästa sida följer en sammanställning över drivhjulen och drivringarna

Nya standarddrivhjul

art.nr.	Benämning	ersätter
1320000	Drivhjul 20" 6P utan drivring	1102001
1320020	Drivhjul 20" 6P drivring Titan	1102000
1320030	Drivhjul 20" 6P drivring MaxGrepp tunn	1100008
1310000	Drivhjul 22" 6P utan drivring	1102201
1310020	Drivhjul 22" 6P Drivring Titan	1102200
1310021	Drivhjul 22" 6P drivring Titan PU däck	1102202
1310030	Drivhjul 22" 6P drivring MaxGrepp	1100009
1300000	Drivhjul 24" 6P utan drivring	1100060
1300010	Drivhjul 24" 6P drivring Alu	1100039
1300011	Drivhjul 24" 6P drivring Alu PU däck	
1300020	Drivhjul 24" 6P drivring Titan	1000000
1300021	Drivhjul 24" 6P drivring Titan PU däck	1100005
1300030	Drivhjul 24" 6P drivring MaxGrepp tunn	1100001
1300031	Drivhjul 24" 6P drivring MaxGr. PU däck	1102472
1300040	Drivhjul 24" 6P drivring Tetragrip	1100002
1300041	Drivhjul 24" 6P drivring Tetragrip PU däck	1102471
1300050	Drivhjul 24" 6P drivring Paragrip	1100003
1300051	Drivhjul 24" 6P drivring Paragrip PU däck	1102470

Nya drivringar till nya standarddrivhjul

art.nr.	Benämning
1905220	Drivring Tetragrip 20" 6P
1905120	Drivring Paragrip 20" 6P
1902011	Drivring Titan 20" 6P 421 mm
1905222	Drivring Tetragrip 22" 6P
1905122	Drivring Paragrip 22" 6P
1902211	Drivring Titan 22" 6P 459 mm
1905224	Drivring Tetragrip 24" 6P
1905124	Drivring Paragrip 24" 6P
1902411	Drivring Titan 24" 6P 510mm
1903060	Drivring MaxGrepp 24" hjul 6P 510mm

Läs mer på nästa sida:

Drivringar		Ersätts av:		Passar hjul	Passar hjul	Passar hjul	Passar hjul	Passar hjul	Fälgmonterad	Ekermonterad
art.nr.	Benämning	art.nr.	Benämning	20"	22"	24"	25"			
1902400	Drivring Titan för 24"-hjul	1902411	Drivring Titan för 24"hjul 6P 510mm			x			x	
1902200	Drivring Titan för 22"-hjul	1902211	Drivring Titan 22" 6P 459 mm		x				x	
1902000	Drivring Titan för 20"-hjul	1902011	Drivring Titan 20" 6P 421 mm	x					x	
1903040	Drivring MaxGrepp för 24"-hjul	1903060	Drivring MaxGrepp 24"hjul 6P 510mm			x			x	
1903200	Drivring Geleplast för 24"-hjul	1905324	Drivring Tetra 24" 4P C/C 507			x*			x*	
1903300	Drivring PRC för 24"-hjul	1903406	Drivring (Para) 24" 4P C/C 507			x*			x*	
1902511	Drivring Titan för 25"-hjul	Samma					x		x	
1904205	Drivring Geleplast för 25" SPOX	1905225	Drivring Tetra 25" 6P				x		x	
1904305	Drivring PRC för 25" SPOX st	1905125	Drivring Para 25" 6P				x		x	
1902611	Drivring Titan för 26"-hjul Spox	Samma						x	x	
1904206	Drivring Geleplast för 26" SPOX st	1905226	Drivring Tetra 26" 6P					x	x	
1904306	Drivring PRC för 26" SPOX st	1905126	Drivring Para 26" 6P					x	x	
	Ny	1902430	Drivring ALU för 24"hjul 6P 510mm			x			x	
1907020	Drivring MaxGrepp 17" tu lå dist	Samma		x	x	x	x	x		x
1907030	Drivring MaxGrepp 17" tu ko dist	Samma		x	x	x	x	x		x
1907320	Drivring MaxGrepp 17" gr lå dist	Samma		x	x	x	x	x		x
1907330	Drivring MaxGrepp 17" gr ko dist	Samma			x	x	x	x		x
1908020	Drivring MaxGrepp 18" tu lå dist	Samma			x	x	x	x		x
1908030	Drivring MaxGrepp 18" tu ko dist	Samma			x	x	x	x		x
1908320	Drivring MaxGrepp 18" gr lå dist	Samma			x	x	x	x		x
1908330	Drivring MaxGrepp 18" gr ko dist	Samma			x	x	x	x		x
1903303	Drivring PRC 16" ko dist st eker	Samma		x**	x					x
1903305	Drivring PRC 18" ko dist st eker	1905122	Drivring Para 22" 6P						x	

* Till äldre 4-clips hjul ** Fälgmonterad med spec.fäste