


Låsbult lagerhylsa framgaffel på X

Klicka på bilderna för större format



LÅSBULT LAGERHYLSA

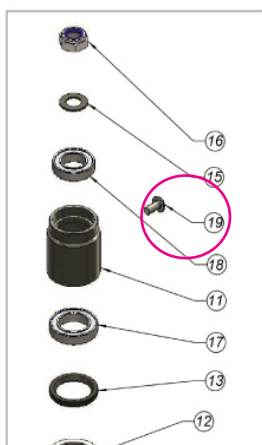

LÅSBULT LAGERHYLSA

Låsbult lagerhylsa framgaffel på X

Då vi fått synpunkter från kunder på att det är **lätt att rundra låsbulten till lagerhylsan** i [framgaffeln på Panthera X](#) vid service/ reparation inför vi en förbättring och ersätter denna bult till en med **torxskalle T20**. Funktion och montering är densamma men med reducerad risk att rundra bulten. Vi inför den nya bulten vid montering på Panthera X rullstolar och den är beställningsbar som reservdel fr.o.m. 1/10-20. Priset förblir oförändrat.

Nuvarande bult:

art.nr. 6003408

Ersättande bult:

art.nr. 6003409DL