

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

Höjdjusterbara ryggstativ

Panthera kan erbjuda höjdjusterbara ryggar i bredd 30 cm och 33 cm.

Dessa ryggar består av:

- 1 st ryggstativ, 30-25 alt. 33-25
- 1 st ryggklädsel, 30-30 alt. 33-30
- 1 st ryggklädsel överdel, 30-20 alt. 33-20
- 1 st justerband bambinorygg, bredd 30 alt. 33
- 2 st Bambinoförlängare

Denna rygg kan justeras i höjd från 28,5 cm (bild 1) upp till 34,5 cm (bild 2).

För att justera rygghöjden, så lossar man lite på bulten som sitter på ryggstativet, och ställer in bambinoförlängaren i önskad höjd. (OBS! Skruva inte ut bulten hela vägen).
Se bild 1.

Benämning	Artikelnummer
Rygg höjdjusterbar bredd 30	323 30 31
Rygg höjdjusterbar bredd 33	323 33 31

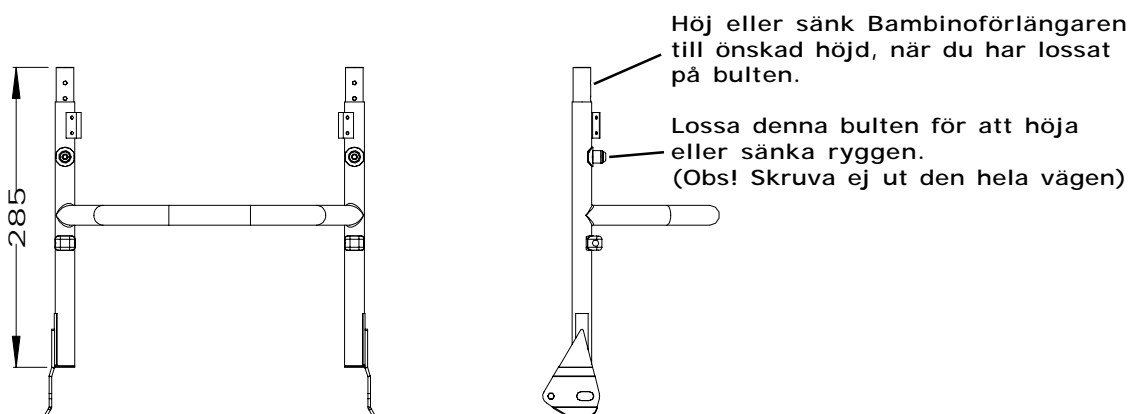


Bild 1. Lägsta läge

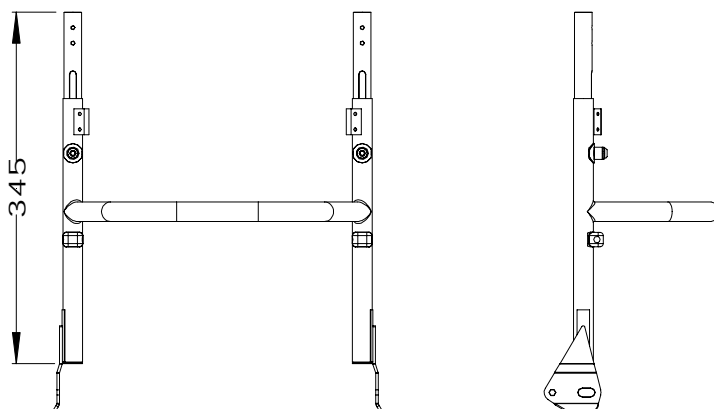


Bild 2. Högsta läge

panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se