

Vilket fäste till vilken modell

En tumregel är att på de modeller som har en fast bakaxel dvs bakaxeln går ej att flytta framåt eller bakåt. I de fallen monteras fästet direkt på bakaxeln.

OBS-Utom på U3 Light bredd 45 cm, då MX2-43P används.

På övriga modeller måste monteringsats användas tillsammans med del av originalfästet.


Modell	Fäste (benämning)	Art.Nr	Kommentar
X	Fäste Smartdrive Panthera U3 light och X	(MX2-44S – 24” MX2-45S – 25” MX2-46S – 26”	Direkt på bakaxeln
U3 Light/LightL	Fäste Smartdrive Panthera U3 light och X	(MX2-44S – 24” MX2-45S – 25” MX2-46S – 26”	Direkt på bakaxeln OBS light 45 bred stol kräver monteringsats MX2-43P
S3/S3 kort	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S- 3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 Kort låg	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S- 3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 Large	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S- 3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 Kort abd	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S- 3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 Swing /Swing kort	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S- 3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
Utökat sortiment			
U3 Light Y Front	Fäste Smartdrive Panthera U3 light och X	(MX2-44S – 24” MX2-45S – 25” MX2-46S – 26”	Direkt på bakaxeln OBS light 45 bred stol kräver monteringsats MX2-43P
U3 Light Y front 90°	Fäste Smartdrive Panthera U3 light och X	(MX2-44S – 24” MX2-45S – 25” MX2-46S – 26”	Direkt på bakaxeln OBS light 45 bred stol kräver monteringsats MX2-43P

U3 Light Y front hög	Fäste Smartdrive Panthera U3 light och X	(MX2-44S – 24” MX2-45S – 25” MX2-46S – 26”	Direkt på bakaxeln OBS light 45 bred stol kräver monteringsats MX2-43P
U3 Y front	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
U3 Y front kort	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
U3 Front låg	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3Swing låg 0°	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3Swing lång	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 0°	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E
S3 Lång	Fäste Smartdrive Panthera U-3/S-3	(MX2-43P)	Komplett monteringsats, se nedan Fig E

Här hittar du monteringsanvisning

[montering_smartdrive_faste_panthera.pdf](#)

Komplett sats innehåller:

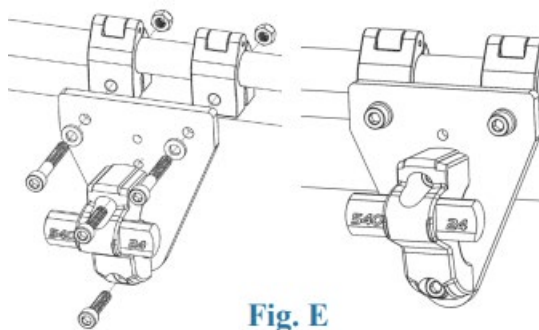

2st gångjärnssklämma

1st monteringsplatta

3st ”halvmåne” fäste (24”, 25”, 26”)

4st bultar

4 muttrar

Fäste direkt på bakaxel innehåller:

22" (501) hjul/däck	Använd 24-tumsklämma	Fig. A 
24" (540) hjul/däck	Använd 24-tumsklämma	
25" (559) hjul/däck	Använd 25-tumsklämma	
26" (590) hjul/däck	Använd 26-tumsklämma	

Här hittar du lista över andra stolsmärken/modeller som är kompatibla/ godkända för användande med Smart Drive

[Wheelchair Compatilty \(permobil.com\)](http://permobil.com/Wheelchair%20Compatilty)